

ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

MAGYAR


ÜDVÖZÖLJÜK AZ ÖN ELOFLEXÉBEN

Köszönjük, hogy az Eloflexet választotta elektromos kerekesszékének. Örülünk, hogy az Eloflex mellett döntött, hiszen küldetésünk a mindennapi élet egyszerűsítése és a mobilitási kihívásokkal küzdő emberek szabadságának növelése. Reméljük, hogy az Eloflex lehetővé teszi Önnek, hogy mindkét előnyt élvezze.

Az új elektromos kerekesszékének használata kifizetődő élmény kell, hogy legyen. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a használatról és a karbantartásról. Erősen javasoljuk, hogy az Eloflex első használatba vétele előtt olvassa át a teljes dokumentumot. Azt is tanácsos, hogy mielőtt más környezetbe merészkedne, gyakorolja az Eloflex működtetését egy csendes, nyitott és vízszintes helyen.

Azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt az Eloflex használatának megkezdésében. Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Sok szerencsét és nagy örömet kívánunk az Eloflex készülékével. Vezessen óvatosan!

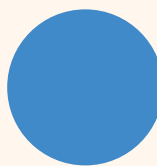

TARTALOMJEGYZÉK

Intended Use	3	Armrests / Backrest	11
Unfolding / Folding	4	Adjust the Back / Lumbar Support	12
Dissemble / Assemble	5	Locking Mechanism / Anti-Tip Device / Manual Driving	13
Charging	6	Seat Belt / Transport and Storage	14
Installing the Joystick / Folding Down the Joystick	7	Driving	15
Using the Joystick	8	Safety Instructions When Driving / Safety	16
Additional Functions	9	General Safety Instructions	17
Footrest	10	Technical Specifications	18

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Osztályozás és rendeltetésszerű használat

Az Eloflex elektromos kerekesszékeket olyan emberek számára fejlesztették ki, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak járni, de rendelkeznek a látásukkal, fizikai és szellemi képességükkel ahhoz, hogy egy elektromos kerekesszéket irányítsanak.

Az Eloflex elektromos kerekesszék kellően kompakt és rugalmas beltéri használatra, de kültéri használatra is alkalmas. A "Műszaki adatok" című fejezet a dokumentum hátoldalán a sebességre, a fordulási sugárra, a hatótávolságra, a maximális emelőkapacitásra, a maximális felhasználói súlyra stb. vonatkozó információkat tartalmazza.

Az Eloflex az EN12184:2014 - B osztály (beltéri és kültéri használat) szerint tesztelt és jóváhagyott. Az Eloflex az ISO-7176 és az IEC60601 szabványok szerint is jóváhagyott, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint engedélyezettek.

Az Eloflex elektromos kerekesszékek megfelelnek az MDR 2017/745 vonatkozó követelményeinek.

Az MDR 2017/745 VIII. mellékletének III. fejezetével összhangban kiadták az MDR 1. osztályú megfelelőségértékelést/CE-jelölést. Megfelelőségértékelési eljárás: Az MDR 2017/745 II. és III. melléklete. A CE-jelölés érvényét veszti, ha olyan cserealkatrészeket vagy tartozékokat használ, amelyeket nem hagytak jóvá ehhez a termékhez.

Szükség van a címre.

Az Eloflex elektromos kerekesszék célja a sérülés vagy fogyatékosság kompenzálása, és az alábbi esetekben ajánlott:

- Ha a felhasználó nem tud járni, vagy nagyon korlátozottan képes járni, ami megnehezíti a saját otthonában való mozgást.
- Ha ki kell hagyni az otthonot, hogy kimozduljon, vagy a mindennapi ügyek intézéséhez rendszeresen látogatott helyekre menjen.
- Ha a felhasználónak a mozgáskorlátozottsága miatt nehézséget okoz a munka vagy a tevékenységek elérése vagy elvégzése.

Az Eloflex elektromos kerekesszékek használata mind a beltéren, mind a szabadban ajánlott, ha a kézzel működtetett kerekesszékek használata a mozgáskorlátozottság miatt nem lehetséges, de az elektromos kerekesszékek megfelelő kezelése még lehetséges.

Tartozékok

A töltő, a fényvisszaverők és egy egyszerű szerszámokat tartalmazó táskát az ülés alatti tárolótáskában található a szállításkor.

Hasznossági eszközök

Az Eloflex elektromos kerekesszéket csak akkor használja, ha az teljesen működőképes; ellenkező esetben saját magát és másokat is veszélynek teszi ki. Az alábbi lista nem tartalmaz minden lehetséges helyzetet, de leír bizonyos körülményeket, amelyek befolyásolhatják a motoros kerekesszék használhatóságát:

- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha az akkumulátorok hibásak vagy deformáltak.
- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a motor rángatózik vagy rendellenes hangokat ad ki.
- Ne használja a motoros kerekesszéket, ha a fékfunkció hibásnak tűnik.
- Ha a gumiabroncsok elhasználódtak, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz vagy a kereskedőhöz.
- Ha a biztonsági öv, a kartámasz, az ülés, a háttámla, a joystick vagy a szék egyéb részeinek sérülését észleli, forduljon segítségnyújtó központjához vagy kereskedőjéhez.
- Ha bármilyen sérülést észlel az elektromos rendszerben (kábelek, akkumulátorok, töltők stb.), forduljon assistance központjához vagy kereskedőjéhez.

Gyártói garancia

Az Eloflex garanciája kiterjed a törött alkatrészek cseréjére, feltéve, hogy a sérülést nem a felhasználó okozta. A garancia nem terjed ki a külső körülményekből, például lopásból, visszaélésből, helytelen használatból, villámcsapásból vagy módosításból eredő károokra.

Élettartam

Az Eloflex becsült élettartama 5 év. A termék élettartamát azonban nagyban befolyásolja a használat és a karbantartás módja. Az Eloflex sokkal hosszabb élettartamú lehet, ha jól gondozzák és a jelen dokumentumban megadott információknak megfelelően használják.

Biztonsági előírások és kockázatok

A FELHASZNÁLÓNAK AZ ELOFLEX KEREKESSZÉK HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL OLVASNIA A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI ÉS VEZETÉSI UTASÍTÁSOKAT.

KIHAJTOGATÁS ÉS ÖSSZECSUKHATÓ


1. Helyezze a összecukott széket a földre az alábbi ábrának megfelelően. Oldja a hátoldalon található szállítási

zárat. Tartsa a háttámlát, és húzza felfelé a szék kinyitásához. A másik kezével nyomja le az ülést, amíg

egyértelmű "kattintást" nem hall, ami azt jelzi, hogy a zár be van kapcsolva.



2. **Fontos!** Győződjön meg róla, hogy a reteszelő retesz teljesen zárva van, hogy a széket kibontott helyzetben rögzítse.

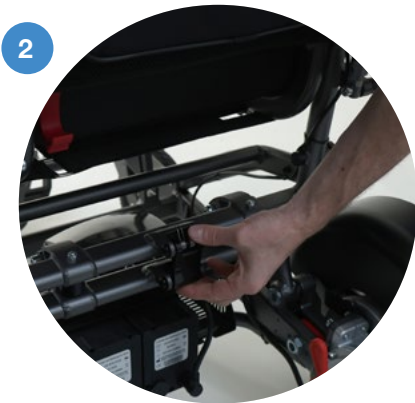


Használat előtt ellenőrizze a zárat.

1. Nyomja meg a piros gombot a fő reteszelő retesz kioldásához a képen látható módon.


2. Tegye egyik kezét az ülésparna elejére. A másik kezével fogja meg a háttámla felső részét, és hajtsa előre. Nyomja össze a széket a képen látható módon. **Csípőpontok!** Legyen óvatos a hajtogatáskor

3. A praktikus szállítási zár bekapcsolható, hogy a kerekeszékét összecukott helyzetben tartsa. Forgassa el a szállítási zárat, amíg a szemben lévő rudat rögzíti.

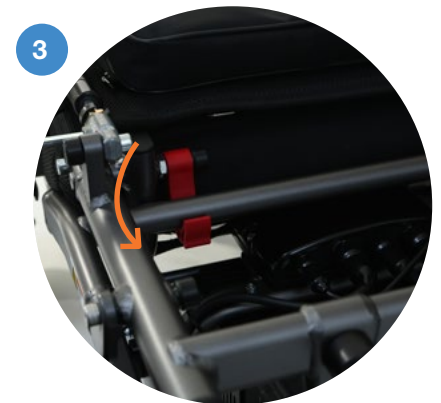


SZÉTSZERELNI

1. Győződjön meg róla, hogy a szék teljesen össze van csukva, és a kartámaszok le vannak engedve. Hajtsa fel a billenégátó eszközöket felfelé. Ezután emelje a széket függőleges helyzetbe.
2. Nyomja meg a piros kart a reteszelő mechanizmus kioldásához.
3. Emelje a felső részt egyenesen felfelé, amíg teljesen szét nem választható. Mivel az alkatrészek nehezek és felborulhatnak, óvatosan kezelje őket, amikor külön, függőleges helyzetben mozgatja.

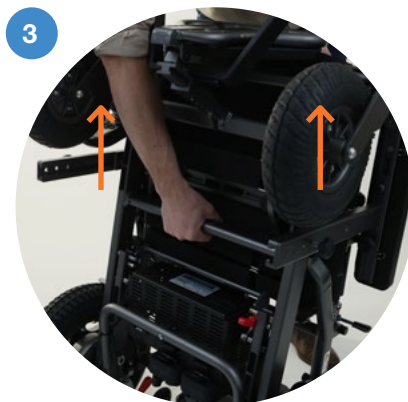

ÖSSZESZERELÉS

1. Emelje fel a felső részt, és helyezze megfelelően az alsó részen lévő vezetősínek segítségével. A reteszelő mechanizmus automatikusan bekapcsol, egy kattánás hallható, és a csatlakozó csatlakozik, amikor a felső rész teljesen a helyére kerül.
2. **Figyelem:** Újraszerelés után ellenőrizze a reteszelő mechanizmust, hogy használat előtt biztonságosan rögzítve legyen.
3. Hajtsa ki újra a széket. Győződjön meg róla, hogy a reteszelő kampó zárva van, mielőtt bekapcsolja az elektromos kerekesszéket és használja.

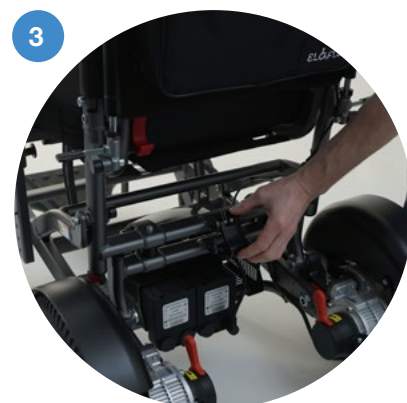

TÖLTÉS

Mielőtt elkezdené

- Az Eloflexet a kézbesítéskor töltsse fel.
- Csak az Eloflex készülékhez mellékelt eredeti töltőt használja.
- A töltő csak a joystickhoz csatlakoztatható, közvetlenül az akkumulátorokhoz nem.
- Legalább 3 havonta töltsse fel az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátorok maradandó károsodását.

Hogyan kell tölteni

Törekedjen arra, hogy az Eloflexet minden egyes utazás után, vagy amikor a joystickon lévő akkumulátorjelző három vonalat csökken.

Kezdje az Eloflex kikapcsolásával (a joystick minden lámpájának ki kell

aludnia).

Csatlakoztassa a töltőt a joystick elején lévő aljzathoz. Győződjön meg róla, hogy az érintkezők egyeznek.

Csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy konnektorba. A töltést a töltőn lévő lámpa jelzi. A piros fény azt jelenti, hogy a töltés folyamatban van.

Körülbelül három óra elteltével az akkumulátorok 90 százalékban feltöltődtek, és a szék használható.

Körülbelül 5-8 óra elteltével a töltő lámpája zöldre vált, ami azt jelzi, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltődtek. Töltés közben a töltő felmelegszik, ami normális.

A töltés befejeztével mindig húzza ki a töltőt mind a konnektorból, mind a

kerekesszékből. Soha ne töltsse felügyelet nélkül. Az akkumulátorok 0 fokig tölthetők. Alacsonyabb hőmérsékleten történő töltéskor előfordulhat, hogy az akkumulátorok nem töltődnek fel teljesen.

Ha az Eloflexet fagypont alatti hőmérsékleten használja, az befolyásolja a hatótávolságot. Például -10 fokon a hatótávolság akár 50%-kal is csökkenhet.

Hosszú távú tárolás

Az akkumulátorok tartósan károsodhatnak, ha a feszültség túlságosan lecsökken.

Javasoljuk az akkumulátorok leválasztását a kisülés minimalizálása érdekében, és rendszeres (legalább 3 havonta egyszeri) újratöltését.

Soha ne hagyja a töltőt állandóan csatlakoztatva.



Az akkumulátorok rendszeres töltésének elmulasztása maradandó károsodást okozhat

TELEPÍTSE A JOYSTICKOT

1. Szerelje fel a joystickot a gyorskioldó kar összeszerelésével a kartámaszra úgy, hogy a retesz **(A)** kifelé nézzen. Állítsa be az anyát **(B)**, hogy a retesz teljesen zárható legyen, és a joystick

biztonságosan a helyén maradjon. A joystick jobb vagy bal oldalon is felszerelhető külön megvásárolható adapter segítségével.

2. Kapcsolja össze a kábelcsatlakozókat, és óvatosan csavarja őket, amíg a csapok a lyukakba nem illeszkednek, és a két csatlakozó hornyai nem illeszkednek egymáshoz. Ezután csavarja biztonságosan a hüvelyeket mindkét csatlakozási pontra.



Kérjük, ügyeljen arra, hogy a csatlakozóban lévő csapok ne sérüljenek meg, illetve ne hajlítsák el.

A JOYSTICK LEHAJTÁSA

Az okos joystick-tartó lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan leengedje a joystickot anélkül, hogy eltávolítaná. Ez azt jelenti, hogy közelebb kerül az asztal széléhez, ami jobb ülőhelyzetet biztosít.

1. Emeld fel a zárkart a joystick felszabadításához.
2. Húzd óvatosan előre a joystickot. Ezután engedd, hogy a joystick egyenesen lefelé lógjon.



A JOYSTICK HASZNÁLATA

1. LCD

2. Multifunkciós gombok

3. USB-csatlakozó

TIPP: Használja a joystick alatt található USB-csatlakozót mobiltelefonja töltéséhez.

4. Töltő bemenete

5. Fény

6. Sebességmérő

Megjeleníti az aktuális sebességet.

7. Sebesség beállítása

Megmutatja a megtett távolságot és az aktuális sebességet.

8. Trip/ODO-mérő

A legutóbbi bekapcsolás óta megtett

távolságot (utazás) vagy a jármű teljes távolságát (ODO) mutatja.


9. Az akkumulátor töltöttségi szintje

Az akkumulátorok maradék energiáját jelzi. Teljesen feltöltött állapotban minden sáv fehér színű. A feltöltés akkor ajánlott, ha már három sáv elhasználódott.



Joystick

A szék sebességét és irányát vezérli.

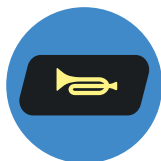

Kürt

Nyomja meg a figyelemfelhívó hangjelzéshez.



Sebesség csökkentése

Nyomja meg, hogy a szék lassabban menjen.



Be- és kikapcsolás

Nyomja meg az Eloflex be- vagy kikapcsolásához.



Növelje a sebességet

Nyomja meg, hogy a szék gyorsabban menjen.



Fény be/ki kapcsolása




Nyomja meg a lámpa be- vagy kikapcsolásához.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Beállítások módosítása

Módosíthatja a szék beállításait, beleértve a nyelvet, a kürt hangerejét és a mértékegységeket.

1. A beállítások eléréséhez nyomja meg a jobb oldali multifunkciós gombot. Ekkor megjelenik a lehetőségek listája.
2. A gyorsgombokkal görgessen felfelé és lefelé az opciók listáján.
3. Válasszon ki egy funkciót a jobb oldali többfunkciós gomb megnyomásával (Enter), vagy lépjen vissza egy lépést a bal oldali többfunkciós gomb megnyomásával (Return).

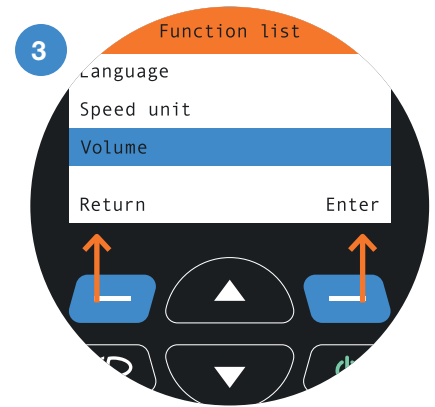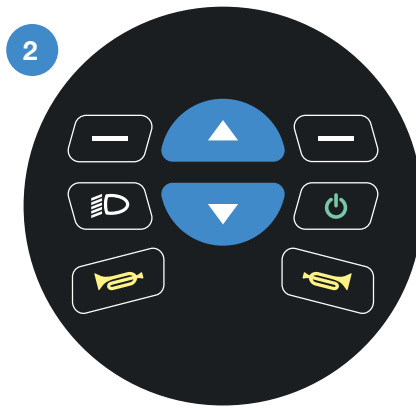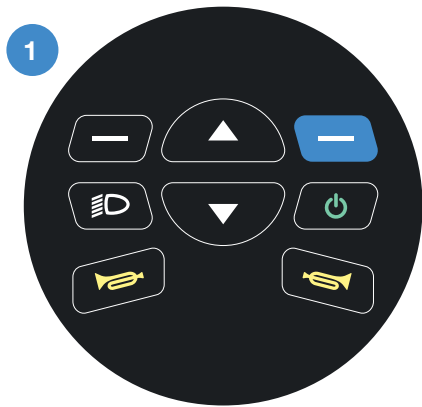

Zár / gyermekbiztonság

Az Eloflex elektronikusan lezárható a fel és le nyilak egyidejű, 3 másodpercig tartó nyomva tartásával. A kijelző tetején egy kis szimbólum jelzi, hogy a zár aktiválva van. (A joysticknak be kell lennie kapcsolva a lezáráshoz/feloldáshoz).

USB töltőport

Az USB-porton keresztül mobiltelefonok, iPadek és más hordozható eszközök

tölthetők. 5V-os áramot szolgáltat, a csatlakoztatott eszköz által meghatározott töltési árammal, maximum 2,1A-ig.

Figyelmeztetések

A kijelző képes hibakódok megjelenítésére a hibák jelzésére. Az 1-es és 2-es hibakódok azt jelzik, hogy a mágneses fékek aktívak.

Távvezérlés alkalmazáson keresztül

Az Eloflex kerekesszék egy alkalmazáson keresztül is vezérelhető. Használja az alábbi QR-kódokat a letöltéshez. Szükség esetén forduljon a márkakereskedőhöz a részletes utasításokért. MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásvezérlés nem használható segédvezérlő eszközként (pl. amikor egy személy ül a székben).



LÁBTARTÓ

Hajtsa fel a lábtartót

A könnyebb be- és kiszállás érdekében a lábtartó fel- és behajtható az alábbi ábrán látható módon.




Állítsa be a lábtartót

A lábtartómagassága két rögzített pozícióba állítható.

1. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (A), miközben tartja az anyát.

2. Távolítsa el a fekete műanyag borítást az anyákról.

3. Szerelje vissza a lábtartót az alternatív rögzítőnyílásba. Ha a lábtartó nem marad felemelt helyzetben, a feszültséget a rögzítőcsavarok (B) meghúzásával lehet beállítani.

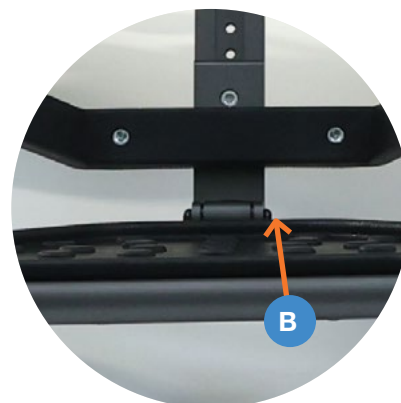

Megjegyzés: Szerelje fel a vádlítámaszt, ha még nincs felszerelve, úgy, hogy a mellékelt konzolt egy csavarral a középső oszlophoz rögzíti. Ezután rögzítse a vádlítámaszt a konzolhoz két csavarral.


KARTÁMASZOK

Állítsa be a kartámaszokat.

Állítsa a magasságot a három pozíció egyikére úgy, hogy először meglazítja a rögzítőcsavart **(A)**, majd meghúzza a belső reteszt **(B)**. Beállítás után húzza meg újra a csavart a zörgés megelőzésére.

A kartámasznak két lehajtott pozíciója van, egy majdnem teljesen lent az összecsucáshoz és szállításhoz, és egy teljesen az ülésel egy vonalban a könnyebb beszálláshoz és kiszálláshoz. Állítsa a szélességet a **(C)** csavarral.

Állítsa a kartámaszt vízszintesen (előre vagy hátra) a kartámasz alatti kis gomb **(D)** megnyomásával és a párna csúsztatásával. Engedje el a gombot a rögzítéshez.

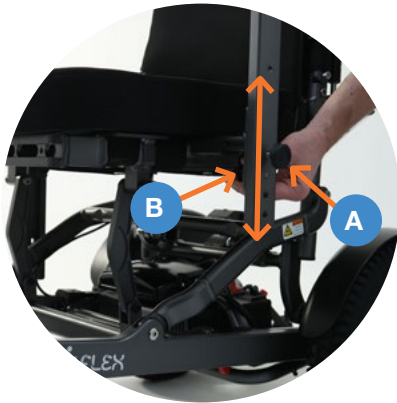

HÁTTÁMLA

A háttámla döntése

A háttámla dőlésszögét fokozatmentesen változtathatja, ha lenyomja a karokat mindkét oldalon. Döntse hátra a háttámlát a kényelmes pozícióba, majd engedje el a karokat, hogy rögzítse a helyén.


Állítsa be a magasságot.

A háttámla magassága az **(A)** csavarok meglazításával állítható. Magas helyzetben a háttámla teteje fogantyúként használható az összecsucott szék szállításához.



A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Húzza fel a háttámla burkolatát, hogy összehajtsa. Húzza meg a tépőzáras pántokat, hogy kényelmes ülőpozíciót érjen el. Ezután hajtsa vissza a burkolatot, és nyomja meg enyhén, hogy rögzítse a tépőzáras pántokhoz.

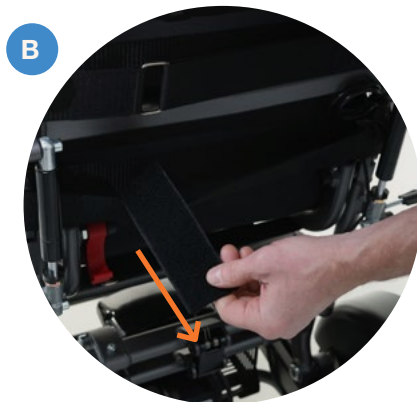



ANTI-TIP ESZKÖZ

A felborulásgátlót nem kell beállítani, de egyes modelleknél a szállításhoz be lehet húzni. A kerekesszéket nem szabad a felborulásgátló aktív állapotában használni, mivel ez súlyos sérülésveszélyt jelent. Minden használat előtt ellenőrizze azt.



Sérülésveszély!
Mindig győződjön meg arról, hogy a billenészállító aktív.

KÉZI VEZETÉS

Kapcsolja ki a kerekesszéket a joystickkal. Ezután nyomja meg a motorokon lévő piros karokat (lásd a képet) a mágneses fékek kikapcsolásához. Ebben a helyzetben a széket kézzel lehet gurítani.

Megjegyzés! Ha a felhasználó segítség nélkül használja a széket, a szék mágneses reteszelésének mindig be kell lennie kapcsolva.



Ne nyomja a piros karokat a lábával, csak a kezét használja.

BIZTONSÁGI ÖV

A biztonságos vezetés érdekében javasoljuk, hogy a szék használata közben mindig használja a biztonsági övet.



SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS


- A szék felemeléséhez ajánlatos először laposra hajtogatni, majd felemelni függőleges helyzetbe, mielőtt végül felemelné.
- Az összehajtogatott szék az autó csomagtartójába lehet tenni, vagy a szekrénybe lehet állítani.
- Szállításkor hajtsa le vagy vegye ki a joystickot.
- Ha a szék egy ideig nem kívánja használni, gondoskodjon a megfelelő tárolásáról és az akkumulátorok

rendszeres feltöltéséről a "Hogyan kell tölteni" című fejezet szerint. Ellenkező esetben a szék használhatatlanná válhat.

- A szék fagymentes, száraz és szellőztetett helyen, zárt térben kell tárolni. Tárolási hőmérséklet 0–30 fok.
- A párnahuzatok levehetőek és 40°C-on moshatók.
- Busz- vagy mozgáskorlátozott szállítás során az Eloflexet a lent

látható képek szerint a rögzítési pontokhoz (1-4) kell csatlakoztatni. Megjegyzés: Az Eloflex nem minősített autósülésként. Ezért az Eloflexben történő ülés autós szállítás közben nem megengedett.

- Repülővel történő szállítás esetén kérjük, hogy a foglalás és a bejelentkezés előtt egyeztessen a légitársasággal. Az Eloflex az IATA ajánlását követi.

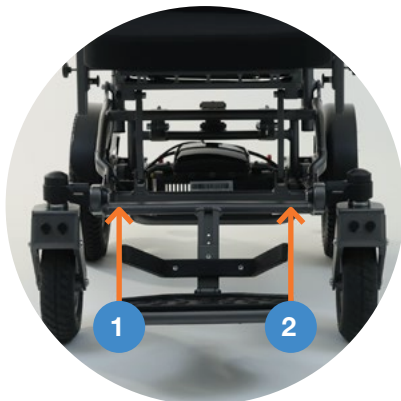

VEZETÉS

Olvassa el

A felhasználónak az Eloflex elektromos kerekesszék használata előtt el kell olvasnia ezeket a biztonsági és vezetési utasításokat.

Gyakorolja a

A gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja az Eloflex vezetését egy asszisztenssel együtt úgy, hogy egy nyitott felületen, lehetőleg a szabadban kezdi, mielőtt a kerekesszéket más emberek között, üzletekben, éttermekben stb. használná. Haladjon előre a joystick lassú előre mozgatásával. Álljon meg a joystick elengedésével.

Visszafordítás

Tolasson vissza a joystick lassú visszafelé mozgatásával. Megálláshoz engedje el a joystickot. Ne feledje, hogy a tolatás megkezdése előtt mindig nézzen hátrafelé, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs útban egy személy vagy tárgy.

Pörgés

Forogjon a joystick óvatos oldalirányú mozgatásával. Vigyázzon, hogy pörgés közben semmi ne legyen az oldal útjában.

Fordulás

Forduljon meg vezetés közben a joystick óvatos oldalirányú mozgatásával abba az irányba, amerre fordulni szeretne. Forduláskor mindig csökkentse a sebességet.

Akadály

Gyakorold az akadályok kikerülését és áthaladását. Mozgassa a joystickot oldalirányban, miközben előrefelé haladva kikerüli az akadályokat. Ne felejtse el csökkenteni a sebességet, amikor akadályokhoz közeledik.

Gyors vezetés

Gyors vezetés: Nyomja a joystickot előre állásban, ha gyorsan szeretne vezetni. Ne felejtse el visszahúzni a joystickot és csökkenteni a sebességet, amint bizonytalannak érzi magát, függetlenül attól, hogy kanyarodik vagy akadályhoz közelít

Akadályokon való áthaladás

Hajtson lassan az akadályhoz, és győződjön meg arról, hogy az első kerekek a haladási irányban vannak. Ezután lassan mozdítsa előre a joystickot, miközben hátrahajolva áthajt az akadályon. Az Eloflexet legfeljebb 6 cm-es akadályokra tesztelték és hagyták jóvá.

Lejtős felületek

Ferde felület esetén próbáljon meg egyenesen felfelé vagy lefelé haladni. Hajoljon kissé előre, amikor felfelé hajt, és hátra, amikor lefelé, hogy a súlypontot megtartsa. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú vezetést, és az esetleges oldalirányú lejtést az ellenkező irányba való dőléssel kompenzálja. Lejtőn mindig lassan vezessen, és vegye figyelembe, hogy a féktávolság jelentősen nagyobb

lehet, mint sík terepen. A kerekesszékek megengedett legnagyobb lejtésszöge 9 fok. Még ha az Ön Eloflexe képes is erre, kerülje az előírt vizsgálati szögnél nagyobb lejtőn való közlekedést, mert felborulás esetén fennáll a súlyos sérülések veszélye.

Felvonók

Ne felejtse el ellenőrizni a liftajtó szélességét és azt, hogy az ajtó milyen gyorsan záródik, mielőtt beszáll a liftbe. Ne feledje, hogy ha a lift nem elég széles ahhoz, hogy meg tudjon fordulni, akkor előfordulhat, hogy tolatnia kell a felvonóból.

Közúton való közlekedés

Vezessen elsősorban járdán, sétányon és kerékpárúton.

Keresztezze az úttestet

Ha lehetséges, mindig a gyalogos-átkelőhelyet válassza az úttesten való átkeléshez. Figyeljen a keresztező autókra. Használja az útburkolat lekerekített részét, ha van rá lehetőség. Kerülje a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket.

Gumiabroncsok

Ha a kerekesszék levegővel töltött gumiabroncsokkal van felszerelve, rendszeresen ellenőrizze a 2,5 bar nyomást. Kilyukadás esetén tartózkodjon a további vezetéstől, és a javítás érdekében forduljon viszonteladójához vagy megfelelő javítóműhelyhez.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK VEZETÉS KÖZBEN

A kerekesszék felborulásával súlyos sérülések veszélye áll fenn.

- Csak olyan emelkedőkön közlekedjen, amelyek nem haladják meg a megadott maximális szöveget
- Mindig használjon billenésgátlót, amikor az Eloflex-szel közlekedik
- Lejtőn lefelé mindig alacsonyabb sebességgel kell vezetni
- Kerülje az olyan területeket, ahol fennáll a jeges vagy csúszós felület veszélye
- Soha ne próbáljon meg lépcsőn fel- vagy lefelé közlekedni elektromos kerekesszékkel
- Soha ne hajtson át az ajánlott maximális magasságnál magasabb akadályokon.
- Kerülje a gyors mozdulatokat a joystickkal és a hirtelen haladási irányváltásokat vezetés közben

Elakadás veszélye távoli helyeken.

- Egy erősen mozgáskorlátozott felhasználó ne vezessen egyedül hosszabb távokat a szabadban

Sérülésveszély, ha vezetés közben az egyik láb lecsúszik a lábtartóról és a motoros kerekesszék alá esik.

- Vezetés közben mindig helyezze a lábát a lábtartó közepére

Sérülésveszély, ha más tárgyakkal ütközik.

- A szűk átjárókon a legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel vezessen át
- Fokozottan figyeljen, amikor asztalok közelébe közelít vagy asztalok mellett vezet, mert az asztallap és a joystick és/vagy a kartámasz között fennáll a becsípődés veszélye.

Fennáll a kerekesszék felborulásának veszélye, ha a felborulásgátló eszközöket eltávolítják, megsérülnek vagy a szabványos rögzítéstől eltérő pozícióban szerelik fel.

- A billenésgátlót mindig fel kell szerelni, amikor a

kerekesszékét használják.

- A billenésgátlók csak szilárd felületen működnek. Puha felületen, például gyepen és havon a borulásgátló berendezés elveszítheti a hatását. Ezért vezessen rendkívül óvatosan a puha felületeken.

Szénszál

Szénszálás modelljeink esetében vegye figyelembe a következőket: Ez az anyag kiváló szilárdság-tömeg aránnyal rendelkezik, ami lehetővé teszi az alacsony ösztömeget. Az anyag ugyanakkor ridegebb, mint más anyagok, például az alumínium, és hajlamosabb a repedésre vagy kilyukadásra. Ezért a szénszálás termékeket általában óvatosabban kell kezelni, mint más termékeket, és ez az Eloflex kerekesszékére is vonatkozik.



BIZTONSÁG

Vasúti síneken való átkelés

A vasúti síneken mindig egyenesen szemből kell átkelni, soha ne ferdén, oldalról. Soha ne keljen át egyedül a vasúti síneken, mindig legyen Önnel valaki, aki segíthet Önnek.

Éles szélek

Legyen óvatos, ha meredek lejtőkön közlekedik, mert a szék könnyen eltörhet. Az Eloflex legfeljebb 9 fokos lejtőre van tesztelve és jóváhagyva. Mindig legyen Önnel valaki, aki tud segíteni.

Magas élek

Legyen óvatos, amikor felfelé vagy élekre hajt, vagy ki. Az Eloflex legfeljebb 6 cm-es élekre van tesztelve és jóváhagyva. Mindig legyen Önnel valaki, aki tud segíteni.

Áthelyezés

Javasoljuk, hogy mindig legyen Ön mellett valaki, aki tud segíteni az Eloflexre való fel- és leszállásnál. A mozgás megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Mozgás előtt mindig emelje fel a kar- és lábtámaszt, hogy megkönnyítse a székbe való be- és kiszállást.

Ne javítson egyedül

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani az elromlott elektromos kerekesszékét. Ha megpróbálja saját maga megjavítani a széket, a garancia nem érvényes. Mindig forduljon az Eloflexhez vagy a széket értékesítő/felíró üzlethez vagy asszisztens

központhoz. Soha ne módosítsa saját maga a motoros kerekesszékét.

Nincs játék

Soha ne engedje, hogy olyan gyermekek, akik általában nem használnak elektromos kerekesszékét, ráüljenek az Eloflexre vagy használják azt.

Tisztítás

Soha ne tisztítsa az Eloflexet folyó vízzel. Csak nedves ruhával törölje át. Ha az Eloflex lassan hajtódik össze és össze, olajjal vagy szilikon spray-vel kenje be az ízületeket.

Óvakodjon a hőtől

Soha ne hagyja az Eloflexet közvetlen napfényben, hőforrás vagy nyílt tűz közelében. Az elemek megsérülhetnek, és egyes felületek annyira felforrósodhatnak, hogy fennáll a sérülés veszélye. Az Eloflexet -10 foktól +45 fokig használhatja. Alacsony hőmérsékleten a vezetési hatótávolság csökken. A kerekesszék az EN 12184 szabvány szerint gyújtásbiztos.

Tárolás

Tartsa az Eloflexet gyermekek elől elzárva, amikor nem használja. A széket fagymentes, száraz és szellőztetett helyen, zárt térben kell tárolni. Tárolási hőmérséklet 0-30°C.

A töltő

A töltőt soha nem szabad letakarni, amikor az Eloflex

töltésére használják. A töltő felforrósodik, és fennáll a baleset vagy sérülés veszélye.

Akkumulátorok

Soha ne tárolja az akkumulátorokat közvetlen napfényben vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet nulla fok alá csökkenhet. Az akkumulátorokat száraz és szellőző helyen kell tárolni. Megsemmisítés esetén az akkumulátorokat újra kell hasznosítani a nemzeti/helyi előírásoknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mint minden akkumulátoros termék esetében, a hatótávolság idővel csökken, beleértve a garanciaidő és a termék élettartamát is.

Használat

Az Eloflex elektromos kerekesszékét úgy tervezték, hogy különböző igényeket elégítsen ki. A felhasználó számára való alkalmasságára vonatkozó döntést a koordinátor vagy viszonteladó és a felhasználó közösen hozza meg. Az Eloflex nem vállal felelősséget azért, ha a motoros kerekesszék nem megfelelően igazodik a felhasználó igényeire.

Módosítások

Az Eloflexet elsősorban alapkonfigurációban kell használni. Bármilyen módosítást vagy beállítást csak az Ön által megbízott szervizközpont vagy az Eloflex végezhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a használati utasításnak nem megfelelő módosítások vagy a nem megfelelő karbantartás miatt bekövetkezett károk vagy meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a kerekesszéket a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő célokra használják.

- A motoros kerekesszéket csak a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja (lásd fentebb, "Típusbesorolás és rendeltetésszerű használat" fejezet).
- Soha ne használja (ne üljön bele) a kerekesszéket, miközben azt egy másik járműben személygépkocsiban/buszban szállítják.

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszéket csökkentett vezetési képességgel használják.

- Ne használja a kerekesszéket, ha vezetési képességei például betegség, gyógyszeres kezelés vagy alkohol miatt csökkentek.

Sérülésveszély áll fenn, ha a motoros kerekesszéket akaratlanul elmozdítják.

- Kapcsolja ki a kerekesszéket a beszállás és kiszállás előtt, vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön, egy másik személy vagy egy tárgy érintkezhet a joystickkel.
- Ha a motorok ki vannak kapcsolva, a fékek nem működnek. Ezért a kerekesszéket csak sík terepen szabad tolni, lejtőn soha. Soha ne hagyja a kerekesszéket kikapcsolt motorokkal lejtőn vagy lejtő közelében.

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszéket menet közben kikapcsolják, például a be/kikapcsoló gombbal vagy a kábel letépésével, mivel az

egy kemény rántással megáll.

- Vészfékezéskor engedje el a joystickot. Ekkor a kerekesszék automatikusan megáll.

A kerekesszékből való leesés miatt fennáll a sérülés veszélye

- Ne mozogjon előre, ne hajoljon előre a térdje között, és ne hajoljon a kerekesszék pereme fölé, például tárgyak eléréséhez.
- Javasoljuk, hogy mindig használja a biztonsági övet, és minden utazás előtt állítsa be újra.
- Az ülések/járművek közötti átszálláskor a lehető legközelebb vezessen az új pozícióhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a rés és a kerekesszék felborulásának kockázata.

A megengedett maximális terhelés túllépése esetén fennáll a személyi sérülés veszélye.

- Tartsa be a maximálisan megengedett terhelést (lásd a "Műszaki adatok" fejezetet a dokumentum hátulján).
- A motoros kerekesszéket csak egy személy használhatja. Soha ne használja a kerekesszéket egyszerre több személy szállítására.

Személyi sérülés és a kerekesszék károsodásának veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszék használatakor az összecukható zár nem megfelelően rögzítve oldódik ki.

- Ha a motoros kerekesszék reteszelve nem kattant be megfelelően, a szék használat közben hirtelen összecukódhat, ami a kerekesszékből való kiesést okozhatja.

- A motoros kerekesszék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy a reteszelőhorog megfelelő helyzetben van.
- A kerekesszék összecukása során fennáll a személyi sérülés és az összenyomódás veszélye.
- A motoros kerekesszéket mindig a használati utasításban leírtak szerint hajtja össze és emelje fel.
- Ügyeljen arra, hogy össze- és szétajtáskor semmi vagy senki ne szoruljon be.

Személyi sérülés és a kerekesszék károsodásának veszélye áll fenn, ha a kerekesszéket nedves helyen használja.

- A motoros kerekesszéket nem szabad használni hőségben.
- A motoros kerekesszéket nem szabad fürdés közben használni.
- Kerülje a hosszabb ideig tartó esős időben történő vezetést.

EMC

- Fennáll annak a veszélye, hogy a kerekesszék elektromágneses mezők miatt zavarja a berendezéseket, vagy azok megzavarhatják azokat. Ez hatással lehet a kerekesszék vezérlésére.
- Ez a készülék Bluetooth adóval van felszerelve. További információért forduljon a viszonteladójához.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK H2

NETTÓ SÚLY Akkumulátorok nélkül	19 + 23 kg	MAX. DÖLÉSSZÖG Statikus / dinamikus	9° / 6°
TELJES SÚLY Akkumulátorokkal	46 kg	MAX. AKADÁLY	5 cm
SEBESSÉG	6,5 km/h	KEREKEK 2,5 bar	9" hüvelykes első (levegővel felfúj) 13" hüvelykes első (levegővel felfúj)
HATÓTÁVOLSÁG	30 km*	ÜLÉS M x Sz x Mé	58 x 48-60 x 47
IDŐTARTAM Töltésenkénti	5 h	MAX. FELHASZNÁLÓI SÚLY	190 kg
MOTOR	2 x kefe nélküli, nagy teljesítményű motor	BOTKORMÁNY	Jobbra vagy balra szerelt
MOTOR TELJESÍTMÉNYE	2 x 350 W	PÁRNA	Levehető, eltávolítható huzat
AKKUMULÁTOR +1 extra hely	2 x lítiumion 10 Ah / 24 V (240 Wh)	HÁTTÁMLA	Állítható szög 8–30°
AKKUMULÁTOR SÚLYA	1,8 kg	MÉRET M x Sz x Mé	102-112 x 65 x 125 cm
TÖLTÉSI IDŐ	3 h	MÉRET ÖSSZECSUKVA M x Sz x Mé	54 x 65 x 98 (93**) cm
FORDULÁSI SUGÁR	94 cm	JÓTÁLLÁS	2 év

* Távolság optimális körülmények között, és befolyásolja a hőmérséklet, a vezetési stílus, a tengerszint feletti magasság, az akkumulátor állapota stb. A nagyobb hatótávolság és/vagy nagyobb felhasználói súlykapacitás érdekében javasoljuk három akkumulátor használatát.

** A vádlítámsz eltávolítva.

© Copyright Eloflex

Ez a dokumentum szerzői jogvédelem alatt álló információkat tartalmaz, és az Eloflex írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható vagy sokszorosítható. Az Eloflex nem vállal felelősséget a dokumentumban található esetleges elírásokért, és fenntartja a termékváltoztatások jogát.

Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Ha bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége, vagy információra van szüksége a termékvisszahívásokkal vagy biztonsági közleményekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a segítő központjához vagy a helyi márkakereskedőhöz. Szükség esetén a termék sorozatszámát az alváz alján található matricán találja.

