

# ELŐFLEX



**A MOTOROS KEREKESZÉKEK  
ÚJ GENERÁCIÓJA**

# MIÉRT ÉRDEMES AZ ELOFLEXET VÁLASZTANI?

Az Eloflexszel újra átélheti, milyen nagy szabadsággal jár, ha önállóan tud sétálni és utazni, valamint kirándulásokat tenni a saját autójával. Végre elérhető egy praktikus és hasznos motoros kerekesszék, amelyet Svédországban álmodtak meg olyan kerekesszék-használók, akik azt a célt tűzték

ki maguk elé, hogy könnyebbé és kényelmesebbé tegyék az Ön életét. Az Eloflex segítségével megtapasztalhatja, mekkora a különbség egy hagyományos kerekesszékhez képest, és újra visszanyerheti a mozgásszabadságát!

## ÖSSZECSUKHATÓ

Az Eloflex az összezsukható motoros kerekesszék teljes új generációját képviseli, és számos egyedi tulajdonsággal rendelkezik. A modern kialakítás jóvoltából egy kézzel is kompakt méretűre csukhatja össze, így az otthonában vagy autójában is kényelmesen tárolhatja. Kevés helyet foglal, és kivételesen kis súlyának köszönhetően mindenhol könnyedén magával viheti. Az Eloflex segítségével visszaszerezheti a szabadságát, bármerre is jár.



## KIVÉTELESEN KÖNNYŰ

Az Eloflex motoros kerekesszék akár 80%-kal könnyebb egy hagyományos elektromos kerekesszékénél. Ráadásul könnyedén, egy kézzel összezsukható, ami a súlyával együtt verhetetlen kombinációnak számít a piacon. Letisztult és kompakt, így kirándulásokra is könnyen magával viheti az autójában. Végre nem kell betegszállítókra vagy mozgáskorlátozottak szállítására szakosodott szolgáltatásokra támaszkodnia. Az Eloflex visszaadja a függetlenségét.

## KORSZERŰ TECHNOLÓGIA

Az Eloflex tervezésénél, kialakításánál és gyártásánál a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk. Rendkívül hatékony lítiumion-akkumulátorai mind teljesítmény, mind súly szempontjából jelentősen felülmúlják a régi ólomakkumulátorokat. A nagy teljesítményű, kefe és sebességváltó nélküli, közvetlen meghajtású motorok az egyes kerekre vannak felszerelve, így csendesebbek és hatékonyabbak a hagyományos elektromos kerekesszékben használt nagy méretű motoroknál.



## ÚTON

Az Eloflex összezsukható elektromos kerekesszék tökéletesek rövidebb utakhoz, autós kirándulásokhoz, valamint taxiutakhoz, nyaralásokhoz. Végre sokkal könnyebben látogathatja meg az unokáit, a családtagjait és a barátait.

# A MOTOROS KEREKESZÉKEK ÚJ GENERÁCIÓJA

Az Eloflex egy motoros kerekesszék, amelyből különböző modellek érhetők el a felhasználók különféle igényeinek megfelelően. Az Eloflex az Ön életkorától és fizikai állapotától függetlenül

nagyobb önállóságot biztosít otthon és útközben, és kiküszöböli, hogy külső segítségre legyen szüksége. Könnyű kialakítása egyszerűbbé teszi az eszköz összecsuksát és autóba helyezését.

## FÜGGETLEN, SZABAD ÉLET

Nem nehéz elképzelni, hogy miért hat pozitívan az Eloflex megoldás számos ember mindennapjaira. Először is összecsuksatható, könnyű elektromos megoldás, amely tökéletesen szállítható autóban és más járművekkel, ha elutazik. Ennél is fontosabb azonban, hogy a mobilitás egy merőben új, korábban nem tapasztalt szintjét teszi lehetővé. A hagyományos motoros kerekesszék egyáltalán nem csukhatók össze, és gyakran akár 80–150 kg-ot nyomnak.

Kompakt kialakításának és kiemelt vezetési kényelmének köszönhetően gyakorlatilag bárhová akadálytalanul eljuthat vele. Tehet vele néhány kört a parkban, vagy a belvárosban is boldogulhat a segítségével a zsúfolt boltokban, kávézóknak és éttermekben.



## KOMPAKT ÉS SOKOLDALÚ

A hagyományos motoros kerekesszék jellemzően nagyok, sok helyet foglalnak, súlyuk pedig meghaladja a 100 kg-ot. Emiatt nem könnyű behelyezni, sőt akár beemelni őket egy autóba, ha kirándulni készül. Otthon túl sok helyet foglalnak, és a vezetésük is nehézkes. Ennek azonban nem kell törvényszerűen így lennie. Az Eloflex teljesen modern megközelítést képvisel a motoros kerekesszék kategóriájában, ugyanis alumíniumból vagy szénszálból készül. Egyszerű, egykezes mozdulattal zökkenőmentesen összecsuksatható, így minimálisra csökkentheti a szék által elfoglalt helyet, és a szék kivételesen alacsony súlyát kihasználva az autójában szállíthatja az eszközt.

Kompakt méretének, a hátsókerék-meghajtásnak és a kézi hajtású kerekesszékkel megegyező ülés kialakításnak köszönhetően érezni fogja, hogy mennyivel jobb teljesítményt nyújt az Eloflex. A kis fordulási sugár és a nagyfokú pontosság jóvoltából szűk helyeken és keskeny ajtókon is könnyedén átjuthat.



Egyszerűen járműbe helyezheti és könnyen magával viheti

**ULTRAKÖNNYŰ**



Strapabíró kialakítás 3 év garanciával

**KITŰNŐ MINŐSÉGŰ**

100%

Két akkumulátor a nagyobb biztonság érdekében

**NAGY HATÓTÁVOLSÁG**

# MODEL F

Az Eloflex F a piac legkeresettebb motoros kerekesszéke. Egyedülálló tulajdonságaival, például összecsukhatóságával, kompakt kialakításával és könnyű alumíniumvázával forradalmasította a támogató-segítő technológiák ágazatát. Az Eloflex F modell több ezer, járási nehézségekkel küzdő felhasználó szabadságát adta vissza.

Ez a sokoldalú modell minden korosztálynak, igénynek és célnak megfelel. A korszerű technológiának – többek között az erőteljes, kefe nélküli motoroknak és a székhez járó két lítiumakkumulátornak – köszönhetően kivételes vezetési teljesítményt nyújt, bámulatos hatótávolsága pedig a 30 kilométert is eléri.



SÚLY (KG)

26

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

30

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

52

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

120

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# MODEL L

Az Eloflex L egy kompakt, sallangmentes motoros kerekesszék olyan felhasználók számára, akik nem szeretnék sokat bajlódni a segédeszközükkel közlekedés közben. Kényelmesen összecsukható mindössze néhány másodperc alatt, így könnyen magával viheti, ha autóval vagy repülőgépen utazik.

Az Eloflex L modell kiváló választás azoknak, akik könnyedségre és nyugalomra vágyanak. A tömör kereket nem szükséges felfújni, és többé nem kell amiatt aggódnia, hogy defektet kap. Letisztult, rugalmas formátuma különösen előnyös benti környezetben, ugyanis szűk ajtókon és tereken is könnyedén átjuthat a segítségével.



SÚLY (KG)

25,5

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

30

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

52

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

120

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# MODEL P

Az Eloflex P ülése beépített elektromos döntési funkcióval rendelkezik, amely kialakításánál fogva megkönnyíti a be- és kiszállást a székéből. Ezt a modellt azoknak szánjuk, akik nehezen tudnak felállni, illetve kiszállni egy normál kerekesszékéből. Az elektromos emelési funkció könnyebbé és egyúttal biztonságosabbá teszi ezt a mozdulatsort.

Ezenkívül megkönnyíti a magasabb helyek, például a szekrények és polcok elérését otthon és az üzletekben. A P modell nagyobb ülés magassággal rendelkezik a többi modellhez képest, ami még inkább megkönnyíti a székéből való kiszállás folyamatát. Az Eloflex P ebből adódóan a nagyobb ülés magasságnak és a zökkenőmentesen megemelhető háttámlának köszönhetően kitűnő választás magasabb felhasználóink számára.



SÚLY (KG)	VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)	ÜLÉSMAGASSÁG (CM)	MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)	TELJESÍTMÉNY (WATT)
28	30	54	160	2X 250

# MODEL D2

Az Eloflex D2 egy innovatív összecusukható elektromos kerekesszék, amely ugyanolyan elegáns kialakítású, mint a többi motoros kerekesszékünk, de még rendelkezik egy további funkcióval is – a szék ugyanis két részre vehető. Ez a két rész 14 és 16 kg-ra csökkenti a súlyt, ami megkönnyíti a szék szállítását és behelyezését az autó csomagtartójába.

A stabil D2 modellt akár 160 kg súlyú felhasználók is nyugodtan használhatják, ráadásul a kényelemről és az egyszerű manőverezésről is gondoskodik. Az Eloflex D2 lehetővé teszi, hogy aktív életet éljen, legyen szó sétákról, utazásról vagy a mindennapi teendők intézéséről.




SÚLY (KG)	VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)	ÜLÉSMAGASSÁG (CM)	MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)	TELJESÍTMÉNY (WATT)
14 + 16	30	50	160	2X 250

# MODEL H

Az Eloflex H modellel megvalósítottuk a lehetetlent – ez a kifejezetten nehezebb és magasabb felhasználóink számára tervezett, nagy teljesítményű elektromos kerekesszék akár 200 kg súlyú felhasználók számára is optimális. Figyelemre méltó, hogy összecukás után egy átlagos személygépkocsiban is szállítható.

A H modell egy tágas, kiváló vezetési jellemzőkkel bíró kerekesszék, amelyben kényelmesen elférnek a kerekesszéket használók. A modellt széles ülése, kényelmes ülésmagassága és komfortos vezetési pozíciót biztosító kialakítása kellően rugalmassá teszi ahhoz, hogy magasabb személyek is örömmel használják.

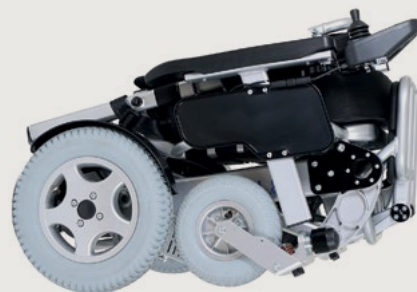

SÚLY (KG)	VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)	ÜLÉSMAGASSÁG (CM)	MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)	TELJESÍTMÉNY (WATT)
43	40	54	200	2X 400

# MODEL K

Az Eloflex K egy kompakt, könnyű és összecukható motoros kerekesszék, amelyet 7 és 15 év közötti gyermekek és tizenévesek számára terveztünk. A K modell lehetővé teszi a gyermekek és a tizenévesek számára, hogy aktívan részt vegyenek különböző programokon. Könnyebben szerepet vállalhatnak az olyan hétköznapi tevékenységekben, mint az iskolai utazások, a bevásárlás, a vacsorák, a kirándulások, valamint a barátoknál és családtagoknál tett látogatások.

Mindehhez a kerekesszéknek hála nem lesz szükség különleges közlekedési megoldásokra. A kompakt és könnyű kialakítású K modell épp olyan elegáns és esztétikus, mint a többi Eloflex-modell. A széket kifejezetten úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjon a felhasználók növekedéséhez.



SÚLY (KG)	VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)	ÜLÉSMAGASSÁG (CM)	MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)	TELJESÍTMÉNY (WATT)
26	30	47-52	90	2X 250

# MODEL Z

Az Eloflex Z a legexkluzívabb összecsukható elektromos kerekesszék mind a saját kínálatunkban, mind a tágabb piacon. Ez a modell azok számára készült, akik mindenképp a legjobbat akarják, és szigorú mérce alapján választanak támogató-segítő eszközt. A szénszálaz váz kivételesen alacsony – mindössze 23 kilogrammos – súlyt tesz lehetővé. Formátuma kompakt, rugalmas és összecsukható.

A nagy műgonddal megalkotott tervezési jellemzők és az ötletes részletek a piac legfejlettebb beállítási lehetőségeit kínálják, és lehetővé teszik az optimális személyre szabást. A páratlan vezetési teljesítmény, a rendkívüli, akár 45 km-es hatótávolság és a kivételes megbízhatóság csak néhány példa a modell egyedülálló tulajdonságaira.



SÚLY (KG)

20

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

30

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

52

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

120

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# MODEL C3

Az Eloflex C3 ötvözi az Eloflex legkedveltebb tulajdonságait a szénszálaz konstrukció élvonalbeli előnyeivel, így hihetetlenül könnyű és tökéletes társ a mindennapi használathoz.

A mindössze 20 kg-os Eloflex C3 elegáns kialakítással büszkélkedhet, amelyet robusztus kerekek és erőteljes Eloflex motorok egészítenek ki, biztosítva a kiváló és zökkenőmentes vezetési élményt. A 160 kg-os maximális felhasználói teherbírással és a további akkumulátorok számára kialakított további helyekkel az Eloflex C3 úgy lett megtervezve, hogy megfeleljen és felülmúlja az Ön elvárásait, megbízhatóságot és fokozott mobilitást kínálva.



SÚLY (KG)

20

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

30

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

55

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

160

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# MODEL X

Az egyedi kialakítású Eloflex X-et kifejezetten idősebb felhasználók számára álmotduk meg. Ez a legnépszerűbb motoros kerekesszék a piacon idősöknek, amely bizonyítottan jól működő és nagy népszerűségnek örvendő, keresztartóval ellátott váztechnológiát foglal magában. A széket egy pillanat alatt könnyedén összecsuksukhatja – ehhez elég egyszerűen csak felemelni az ülést.

Az Eloflex X a hűségese idős felhasználóinktól az évek során kapott felbecsülhetetlen értékű visszajelzések, észrevételek és kérések eredményeként jött létre. Ez az „abszolút időskori modell”, amely minden olyan funkciót és megoldást egyesít, amelyre felhasználóink vágyhatnak.



SÚLY (KG)

25

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

25

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

51

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

120

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# MODEL S1

Az Eloflex úttörő és egyedülálló hibrid robogójával zökkenőmentesen mozoghat bel- és kültéri környezetben egyaránt, és könnyedén magával viheti a robogóját az autójában vagy repülőgépen. Semmi sem akadályozza többé a hosszú sétákban, bevásárlásokban, baráti és családi találkozókban és utazásokban.

Könnnyű, egyszerűen szállítható robogó, amely egyenetlenebb terepen zajló kinti kalandokhoz is kellően robusztus. Az Eloflex S1-et úgy alkottuk meg, hogy minden évszak próbáját kiállja, és még a zord északi telek se okozzanak neki gondot. Járművünk egész évben sokoldalú és megbízható közlekedési eszköz.



SÚLY (KG)

37,5

VEZETÉSI HATÓTÁVOLSÁG (KM)

30

ÜLÉSMAGASSÁG (CM)

55-60

MAXIMÁLIS FELHASZNÁLÓI SÚLY (KG)

120

TELJESÍTMÉNY (WATT)

2X 250

# KIEGÉSZÍTŐK

Még nagyszerűbbé teheti Eloflex kerekesszékét, ha közkedvelt és intelligens kiegészítőinkkel a saját igényeire alakítja az eszközt.



## ELOFLEX PRÉMIUM PÁRNÁK

Az Ease by Eloflex svéd gyártású ergonomikus párnákat foglal magában, amelyek az Eloflex által kínált felhasználói élmény optimalizálására szolgálnak.



## OLDALTÁSKA

Az Eloflex Side Bag oldaltáskában kényelmesen tárolhatja a többek között a pénztárcáját, a telefonját és más értéktárgyait, és könnyen hozzájuk férhet.



## BOTKORMÁNYBŐVÍTMÉNYEK

Az Eloflex kettő, különféle igényekhez igazodó bővítményváltozatot kínál a botkormányhoz.



## ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLA

Az Eloflex Headrest fejtámla rendkívül sokoldalú megoldás, amely extra támaszt nyújt a fejnek és a nyaknak.




## KÍSÉRŐ VEZÉRLÉS

Az Attendant Control System vezérlőrendszernek köszönhetően a kerekesszék mögött vagy mellett sétáló személyek botkormánnyal irányíthatják a széket, így az ülő személy erőfeszítésmentesen utazhat.



## VÉDŐBURKOLAT

Protective Travel Cover védőburkolatunk tökéletes kiegészítő az Eloflex motoros kerekesszékek lelkes felhasználóinak, akik féltik a széküket, és minden lehetséges óvintézkedést meg szeretnének tenni az eszköz szállításakor.

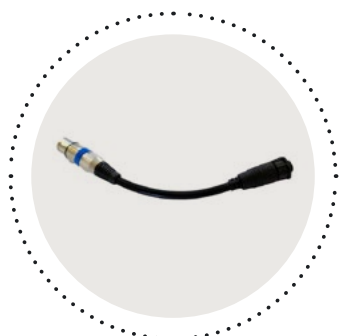

## TÖLTŐADAPTER

Az Eloflex töltőadapter lehetővé teszi a töltő közvetlen csatlakoztatását az akkumulátorhoz.



## ÁLLÍTHATÓ LÁBTARTÓ

Az Adjustable Footrest állítható lábtartóval 0 és 90 fok között tetszés szerint állíthatja a lábtartó szögét.



## RAKODÓ RÁMPÁK

Könnyen bepakolhatja az Eloflexet az autóba az összezsukható és könnyen emelhető rakodórampák segítségével.

# AZ EASE JAVÍTJA AZ ELOFLEX ÁLTAL KÍNÁLT ÉLMÉNYT

A hosszan tartó ülés néha kényelmetlen érzést válthat ki a hátban és az ülőfelületen, valamint bőrirritációt, izomgörcsöket és – a legrosszabb esetben – felfekvéseket okozhat. Az Ease

termékcsalád ergonomikus üléspárnái segítenek megelőzni a felesleges kellemetlenségeket és a felfekvéseket. Emellett enyhítik a fájdalmat, és mérséklik a meglévő problémákat.



## PRÉMIUM PÁRNA - EASE ONE

Az Ease One egy puha és rendkívül kényelmes prémium párna, amelyet azok számára terveztünk, akik hosszabb időt töltenek ülő pozícióban. A párna egy tekericsrugókból álló réteget tartalmaz, amely stratégiaileg a fenéktáji csontok és a farkcsont alatt helyezkedik el. A kontúrok szintén úgy vannak kialakítva, hogy megfelelőbb támogatást és stabilitást nyújtsanak a combnak. Az Ease One különösen jól passzol elektromos kerekesszékekhez, mivel korszerű felfüggesztése védi a hátat és a farkcsontot az egyenetlen felületeken.



## PRÉMIUM PÁRNA - EASE WEDGE

Az Ease Wedge egy ék alakú ülőpárna, amelynek az eleje kissé megemelt. Kifejezetten úgy terveztük, hogy kényelmesebbé tegye a szék használatát a huzamosabb ideig ülő pozícióban lévő, hosszabb lábú felhasználók számára. Az ergonomikus kialakítás elosztja a nyomást, és puha érzetet biztosít. Ez csökkenti a combcsont, a kismedencei „ülőcsontok” és a farkcsont terhelését.



## EASE ARMREST CUSHION

Az Ease Armrest Cushion egy plüss kartámaszhoz, amelyet az Eloflex kerekesszékekhez terveztünk. Az 1 cm vastagságú puha habszivacs megóvja Önt a kellemetlen rezgéstől, és egyúttal csökkenti a felfekvések és az irritáció kockázatát. A stabilitás fokozásával azt is megelőzi, hogy karja lecsússzon a kartámaszról.



## EASE HÁTTÁMLACSŐ-BURKOLAT

Az Ease Backrest Tube Padding egy puha habburkolat, amelyet az Eloflex kerekesszék háttámlájához terveztünk. Használatával puhább és kellemesebb érzésre számíthat, amikor hátradől a székében. Ezenkívül extra háttámaszt és kényelmet biztosít, ha egyenetlen felületen halad át.



## EASE DERÉKTÁMASZ

Ease Lumbar Support is designed in firm and durable viscoelastic “memory” foam. Unlike regular foam, memory foam reacts to body heat and pressure, becoming softer and contouring to the lumbar “lower” spine to reduce back fatigue.



## EASE DERÉKTÁMASZ

Az Ease Lumbar Support deréktámasz masszív és tartós, viszkoelasztikus memóriahabból készült. A normál habbal ellentétben a memóriahab reagál a testhőre és a nyomásra, lágyabbá válik, és a gerinc alsó szakaszához idomul, hogy csökkentse a hátfájást.

Amikor az élet hirtelen megváltozik

# MARIE MEGTALÁLTA AZ IGAZI SZABADSÁGOT AZ ELOFLEXSEL



**Hopptimisten, vagy Marie Hav Lunkvist, ahogy valójában hívják, aktív üzletasszonyként tevékenykedik, aki jelenleg betegség miatt kerekesszékekben ül. Az életet ajándéknak tekinti, és tele van reménnyel és optimizmussal!**

2018 februárjában kaptam meg az Eloflexet, ezt követően körülbelül hat évig más kerekesszékeim volt. Aktív ember vagyok, sokat utazom előadásokkal, és sokféle közösségi feladatban veszek részt magán és a családdal együtt. Mind a hegyekbe, mind a szigetvilágba utazom, és ezekre az alkalmakra feltétlenül szükségem lett egy rugalmas és könnyű elektromos kerekesszékre.

Nem csak akkor van velem az Eloflex, amikor utazom, hanem minden, kezdve attól, hogy nem tudok bejutni zsúfolt boltokba, vagy olyan hétköznapi dolog, mint hogy a szomszéd ajtaja túl keskeny a hagyományos elektromos kerekesszékeim számára, már csak emlék. Többé nem kell aggódnom amiatt, hogy nem tudom megtenni, amit akarok,



amikor akarom, és a saját feltételeim szerint. Ez aztán a valódi szabadság!

# MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

MODELL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	C3	X	S1
<b>NETTÓ SÚLY</b>	27 kg	25,5 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	28,5 kg	16 kg	23 kg	20 kg	25 kg	37,5 kg
<b>TÁVOLSÁG</b>	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	30 km	25 km	30 km
<b>MAX. FELHASZNÁLÓI SÚLY</b>	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	120 kg	120 kg
<b>SEBESSÉG</b>	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
<b>AKKUMULÁTOR</b>	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 12AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V
<b>FORDULÁSI SUGÁR</b>	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	87 cm	88 cm	100 cm
<b>KEREKELŐL</b>	8" solid	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	10" air	8" solid	12" air
<b>KEREKELHÁTSÓ</b>	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8,5" solid	12" air	12" air	12" air	12" air
<b>ÜLÉSMA-GASSÁG</b>	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47,5 cm	52 cm	55 cm	51 cm	55-60 cm
<b>ÜLÉS SZÉLESSÉGE</b>	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
<b>ÜLÉSMÉLY-SÉG</b>	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36 cm	42 cm	45 cm	44 cm	43-48 cm	40 cm
<b>MÉRET (MAXSXMÉ)</b>	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	95x63x100 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
<b>ÖSSZEHAJTOTT MÉRET (MAXSXMÉ)</b>	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52x63/63x50/35 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57,5x32,5 cm	75x64x37 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

A nettó súly nem tartalmazza az akkumulátorokat. Ajánlott légnyomás a levegővel töltött kerekhez = 2,5 kg. Az Eloflex a Svéd Gyógyszerügynökség által orvostechnikai eszköznek minősített, és megfelel az alkalmazandó az EU (2017/745) rendelet, az Orvostechnikai eszközökről szóló rendelet (MDR) követelményeinek, amely biztosítja az orvostechnikai eszközök biztonságát és teljesítményét. CE-jóváhagyással rendelkezik, a következők szerint tesztelték és hagyták jóvá EN12184, ISO-7176, IEC-60601 szabványok szerint, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint repülési engedéllyel rendelkeznek.

Látogasson el a [www.eloflex.eu](http://www.eloflex.eu) weboldalra, ahol helyi információkat, videókat, képeket és a legközelebbi viszonteladót találja.

**ELOFLEX**

THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SWEDEN